

# Melilax



MIKROWLEWKA DOODBYTNICZA Z PROMELAXIN

AKTYWNY KOMPLEKS  
MIODÓW I POLISACHARYDÓW  
Z ALOESU PRAWDZIWEGO  
I ŚLAZU DZIKIEGO

Wyjątkowy pojemnik  
harmonijkowy  
**Easy  
Use**  
łatwiejszy w użyciu

OPATENTOWANA FORMUŁA

**Podwójne działanie Oczyszcza  
jelito bez podrażnień,  
chroniąc błonę śluzową odbytu**

gluten  
free

WYRÓB MEDYCZNY  
Klasy IIb

**Melilax** jest **innowacyjną mikrowlewką na bazie miodu**, która łączy zrównoważone działanie wypróżniające, ochronne i łagodzące błonę śluzową odbytu, pomagającą w walce z dolegliwościami, podrażnieniami i stanem zapalnym, obecnymi w czasie zaparcia.

**Podwójne działanie Melilax** uzyskiwane jest dzięki **PROMELAXIN**, aktywnemu kompleksowi miodów nektarowych i spadziowych, odpowiednio wyselekcjonowanych i przetworzonych na podstawie zawartości monosacharydów, polisacharydów i melanoidyn, wzbogaconemu o **frakcję polisacharydową** z aloesu prawdziwego i ślazu dzikiego.

## JAK DZIAŁA

**Melilax** ma działanie wypróżniające, które nie podrażnia, czyli zapewnia fizjologiczny i zrównoważony bodziec aktywujący defekację.

Ponadto **Melilax**, dzięki swym cechom przypominającym śluz i swęj lepkości, chroni błonę śluzową odbytu podczas przechodzenia stolca, odgrywając rolę poślizgową, podobną do śluzu fizjologicznego. Te szczególne właściwości, połączone z działaniem antyoksydacyjnym, nadają produktowi właściwości ochronne i łagodzące błonę śluzową, zapewniając pośrednie działanie przeciwzapalne, dzięki cechom fizycznym produktu.

## WSKAZANIA

**Melilax** przeznaczony jest do leczenia zaparcí, również w przypadku nadwrażliwości trzewnej (jak w przypadku jelita drażliwego), szczelin odbytu i hemoroidów. Produkt może być stosowany również w ciąży, przez kobiety karmiące piersią i przez niemowlęta.


## SKŁAD

### Substancje czynne 73,2%:


**Promelaxin** aktywny kompleks miodów i polisacharydów z aloesu prawdziwego i ślazu dzikiego  
Mianowany na: monosacharydy  $\geq 50\%$ , polisacharydy (ciężar molekularny  $> 20\ 000$  dalton)  $\geq 0,3\%$   
Zawiera ponadto: mieszanek wodno-glicerynową, sok z cytryny, olejek eteryczny z lawendy.

## SPOSÓB UŻYCIA

1) Otworzyć mikrowlewkę, usuwając obudowę zabezpieczającą kaniulę:

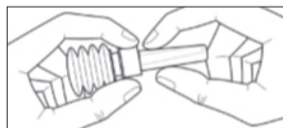


- Chwycić za biały pierścień umieszczony na pojemniku harmonijkowym
- Drugą dłonią zginać obudowę kaniuli do momentu jej złamania i całkowitego oderwania od pierścienia

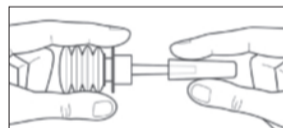

- Wsunąć obudowę kaniuli

2) Nałożyć kilka kropli produktu wokół odbytu i wprowadzić delikatnie kaniulę do odbytu.

3) Wcisnąć do końca mikrowlewkę i następnie trzymać ją wciśniętą do momentu całkowitego wyciągnięcia kaniuli, aby uniknąć zasysania produktu.

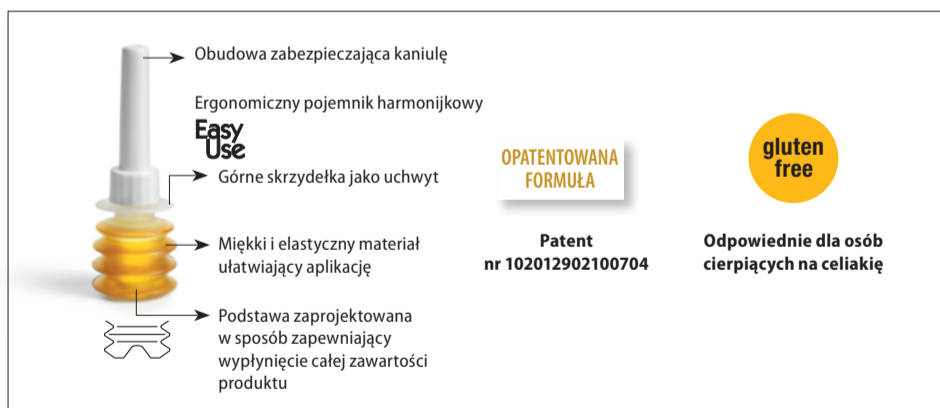

## MELILAX ADULT



Opakowanie 6 jednorazowych mikrowlewek z obudową kaniuli dla dorosłych i młodzieży, po 10 g

**Wskazany dla dorosłych i młodzieży powyżej 12. roku życia. Może być stosowany również w ciąży i w okresie karmienia piersią.**

### DAWKOWANIE

**1 mikrowlewką 10 g w razie potrzeby. W przypadku uporczywych zaparcí stosować 2 dawki jedna po drugiej.**



Opakowanie 6 jednorazowych mikrowlewek z obudową kaniuli dla dzieci i niemowląt, po 5 g

#### Wskazany dla dzieci i niemowląt.

Aby ułatwić aplikację mikrowlewki, zaleca się ułożenie dziecka na lewym boku ze zgiętymi kolanami w kierunku brzucha.



#### DAWKOWANIE

*Dzieci od 3 do 12 lat:*

**1 mikrowlewka 5 g** w razie potrzeby.

W przypadku uporczywych zaparć stosować 2 dawki jedna po drugiej.

*Dzieci od 1 do 3 lat:*

**1 mikrowlewka 5 g** w razie potrzeby.

*Niemowlęta od 0 do 1. roku życia:*

**połowa mikrowlewki 5 g** w razie potrzeby.

#### OSTRZEŻENIA

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub alergii na jeden lub więcej składników. W przypadku długotrwałych zaparć należy skonsultować się z lekarzem w celu wykluczenia innych schorzeń. Mikrowlewka jest jednorazowego użytku dlatego nie może być ponownie stosowana, gdy zużyje się tylko pół dawki, jak w przypadku niemowląt.

Przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od źródeł ciepła i światła. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Okres ważności dotyczy produktu zamkniętego i właściwie przechowywanego.

#### OKRES WAŻNOŚCI

Patrz data ważności podana na opakowaniu. Nie używać po upływie podanej daty ważności.

#### OPAKOWANIE W SPRZEDAŻY

**Melilax Adult:** 6 jednorazowych mikrowlewek z obudową kaniuli dla dorosłych i młodzieży, po 10 g

**Melilax Pediatric:** 6 jednorazowych mikrowlewek z obudową kaniuli dla dzieci i niemowląt, po 5 g

#### ZAPARCIA

Termin „zaparcie” oznacza zwiększenie czasu przebywania stolca w ostatniej części jelita. W takich warunkach dochodzi do nagromadzenia suchego i twardego stolca, spowodowanego nadmiernym wchłanianiem zwrotnym płynów: stolec ma niewielką objętość, oddawany jest **nieregularnie** (również mniej niż 3 defekacje na tydzień) lub z **trudnością i/lub bólami** (z powodu twardego stolca). W niektórych przypadkach może dochodzić również do uczucia niepełnego oddania stolca, pomimo regularnej defekacji lub wkładania znacznego wysiłku w proces oddawania stolca.

#### PRZYCZYNY

Główną przyczyną problemu, w niektórych grupach wiekowych, może być **nieprawidłowy styl życia** (niezbilansowana dieta, niewystarczające przyjmowanie wody, warzyw i owoców, mała aktywność fizyczna i siedzący tryb życia), **zmiany indywidualnych przyzwyczajeń i warunków klimatycznych** (jak na przykład podczas podróży), **stosowanie niektórych leków, choroby układu pokarmowego i metaboliczne** (jak na przykład zespół jelita drażliwego) lub **szczególne sytuacje, takie jak stres, unieruchomienie –konieczność leżenia (zwłaszcza u osób starszych).**

**Hemoroidy, szczeliny odbytu i wypadanie odbytnicy** mogą spowodować zaparcia lub mogą być ich konsekwencją. Trudności w oddawaniu stolca i podrażnienie tworzą błędne koło, które nie pozwala na rozwiązanie problemu zaparć, ani poprawy towarzyszącej im sytuacji. Często przyczyną zaparć jest **dobrowolna kontrola bodźca wydalania stolca**, częsty problem wśród dzieci, zwłaszcza w pierwszych 2-3 latach życia. U dzieci ponadto może dojść do zaparć podczas **przedłużonych stanów podgorączkowych**, które powodują lekkie odwodnienie.

#### PRZYDATNE ZALECENIA

W wielu przypadkach zaparcia mogą zostać wyeliminowane przy pomocy diety bogatej w wodę i błonnik: faktycznie błonnik wiąże w różnym stopniu wodę i przyczynia się do zwiększenia objętości stolca. Ponadto ważna jest regularna aktywność fizyczna.



[www.melilax.pl](http://www.melilax.pl)



0373

Data ostatniej aktualizacji: 02/2016



**Aboca S.p.A. Società Agricola** - Loc. Aboca, 20 - 52037 Sansepolcro (AR) - Italia  
[www.aboca.com](http://www.aboca.com)

Spółka posiada certyfikowane systemy zarządzania jakością ISO 9001 i ISO 13485 oraz systemy zarządzania środowiskiem ISO 14001.