

Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję używania – zawiera ona ważne informacje na temat stosowania tego produktu. W razie pytań należy zwrócić się do swego farmaceuty, lekarza lub skontaktować się z nami.

BAUSCH + LOMB

Hyal-Drop® Night Gel

2 mg/g karbomeru, trójglicerydy o średniej długości łańcucha

Skład:

1 g Hyal-Drop® Night Gel zawiera 2 mg karbomeru, trójglicerydy o średniej długości łańcucha oraz wodę do wstrzykiwań, sorbitol i wodorotlenek sodu. Środkiem konserwującym jest cetymid.

Przeznaczenie:

Hyal-Drop® Night Gel to żel do nawilżania oczu.

Wskazania do stosowania

Hyal-Drop® Night Gel jest wskazany do stosowania w przypadku uczucia suchości w oku i objawów zespołu suchego oka, takich jak zmęczenie, napięcie, uczucie piasku pod powiekami, pieczenie i łzawienie oczu.

Kiedy należy stosować Hyal-Drop® Night Gel:

Hyal-Drop® Night Gel to produkt nawilżający do oczu o wysokiej lepkości, który działa na wszystkie trzy warstwy filmu łzowego, zapewniając długotrwałe nawilżenie i ochronę powierzchni oka w przypadku odczuwania suchości oka.

Produkt Hyal-Drop® Night Gel przeznaczony jest do uzupełniania filmu łzowego, w tym jego ważnej zewnętrznej warstwy lipidowej, co przynosi maksymalną ulgę i zatrzymanie wilgoci na powierzchni oka. Produkt ma kojący i łagodzący wpływ na oczy, a jednocześnie zatrzymuje wilgoć, zapewniając długotrwałą ulgę. Jest to produkt odpowiedni dla wszystkich osób cierpiących z powodu szeregu objawów zespołu suchego oka, takich jak: zmęczenie, napięcie, uczucie piasku pod powiekami, pieczenie i/lub łzawienie oczu. Produkt może stanowić korzystne uzupełnienie terapii innym produktem przeznaczonym do leczenia zespołu suchego oka w celu zapewnienia dodatkowej ochrony.

Suchość oczu jest wywoływana przez:

- czynniki zewnętrzne, takie jak długi czas korzystania z komputera, klimatyzacja, ogrzewanie, dym papierosowy, a także silny wiatr oraz noszenie soczewek kontaktowych;

Inne czynniki, np. niektóre leki (takie jak tabletki antykoncepcyjne, leki przeciwhistaminowe, beta-blokery, leki rozkurczowe i moczopędne) lub niektóre choroby, które przyczyniają się do rozwoju suchości oczu.

Jak często i jak długo należy stosować Hyal-Drop® Night Gel?

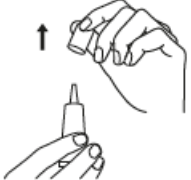
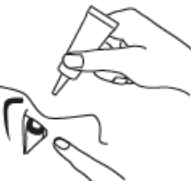
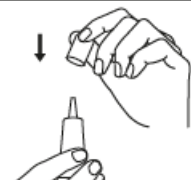
Wprowadzić jedną kroplę żelu Hyal-Drop® Night Gel do oka 15 minut przed snem, jeśli preferowane jest stosowanie produktu na noc.

Hyal-Drop® Night Gel można stosować do 4 razy dziennie.

Po otwarciu produkt ten można stosować przez 6 tygodni.



Jak należy stosować Hyal-Drop® Night Gel?

	1. Przed każdym użyciem należy zdjąć nasadkę ochronną z końcówki tubki.
	2. Nieznacznie odchylić głowę do tyłu i palcem wolnej ręki lekko odciągnąć w dół dolną powiekę. Trzymać tubkę pionowo nad okiem, końcówką zakraplacza skierowaną w dół. Następnie delikatnie ścisnąć tubkę, by wprowadzić jedną kroplę żelu.
	3. Po każdym użyciu należy ponownie nałożyć nasadkę ochronną na tubkę. Zamknąć oko i powoli poruszać gałką oczną w różne strony, tak aby dokładnie rozprowadzić kroplę żelu na powierzchni oka.

Kiedy nie należy stosować Hyal-Drop® Night Gel?

Produktu nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek z jego składników.

Ważne informacje na temat stosowania Hyal-Drop® Night Gel

- Bardzo rzadko zgłaszano miejscowe reakcje nadwrażliwości. W takich przypadkach leczenie należy przerwać. Jeżeli pacjent odczuwa uporczywy dyskomfort lub podrażnienie, powinien przerwać stosowanie produktu i skonsultować się z lekarzem.
- Po zakropleniu produkt może powodować przemijające, niewyraźne widzenie, co może utrudniać prowadzenie pojazdów lub obsługę maszyn.
- Nie dotykać powierzchni oka końcówką tubki, by uniknąć ewentualnego urazu.
- Unikać zetknięcia końcówki tubki z okiem lub palcami, aby zapobiec ewentualnemu zanieczyszczeniu żelu.
- Po otwarciu nie udostępniać opakowania innym osobom.
- Przed użyciem należy zdjąć soczewki kontaktowe.
- Przed użyciem innego produktu do oczu lub założeniem soczewek kontaktowych należy odczekać około 15 minut.
- Po upływie 6 tygodni od momentu otwarcia, wyrób medyczny należy wyrzucić.
- Nie stosować po upływie terminu przydatności do użycia.
- Nie stosować, jeśli tubka jest uszkodzona.
- Opakowanie **Hyal-Drop® Night Gel** zawiera drobne plastikowe elementy (nasadka ochronna), które mogą zostać połknięte przez małe dzieci. Istnieje niebezpieczeństwo zadławienia. Dlatego **Hyal-Drop® Night Gel** należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Wyrób może być stosowany przez osoby bez kwalifikacji medycznych i przeszkolenia.
- Przed użyciem produktu nawilżającego do oczu u dzieci należy skonsultować się z lekarzem.
- Nie używać w okresie leczenia produktem leczniczym Oxervate, który stosowany jest do leczenia neurotroficznego zapalenia rogówki.

Jak przechowywać Hyal-Drop® Night Gel?

Przechowywać w temperaturze maks. 25°C.

Utylizacja:

Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Każdy poważny incydent, który miał miejsce w związku ze stosowaniem produktu, należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi.